

Pistosohje


Vaihe 1: Esivalmistelut

A


- Ota esitäytetyn ruiskun sisältävä muovikotelo pois pakkauksesta ja ota esiin tarvikkeet, joita annoksen pistämisessä tarvitaan.
- Jotta pistos olisi miellyttävämpi, jätä esitäytetty ruisku huoneenlämpöön noin 30 minuutin ajaksi ennen annoksen pistämistä. Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä.

Ruiskun osat

Ennen käyttöä

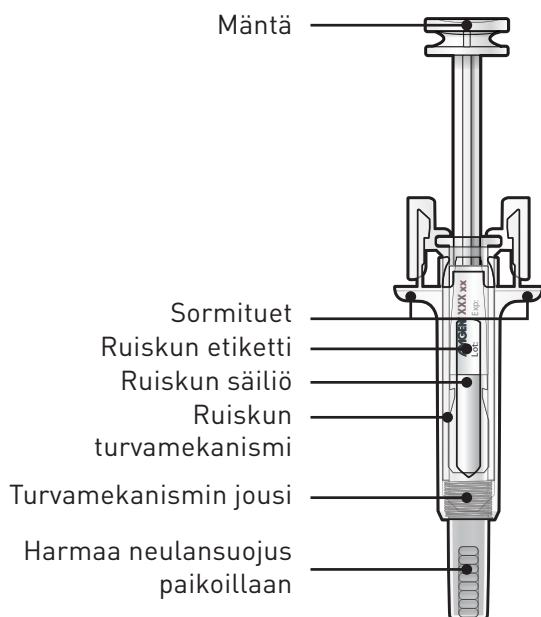

Käytön jälkeen

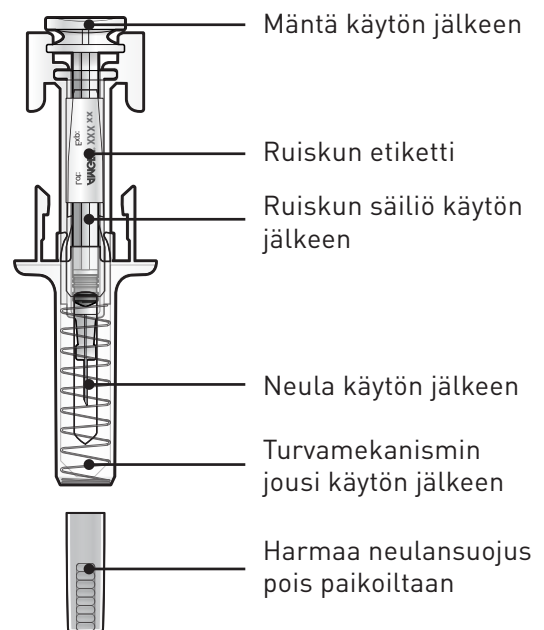


B

**Irrota muovikotelon paperikansi.
Tartu esi-täytetyn ruiskun turvamekanismiin
ja nosta ruisku pois muovikotelosta.**

Jotta ruisku ei vahingoitu:

- ✘ Älä** ota kiinni männästä
- ✘ Älä** ota kiinni harmaasta neulansuojuksesta

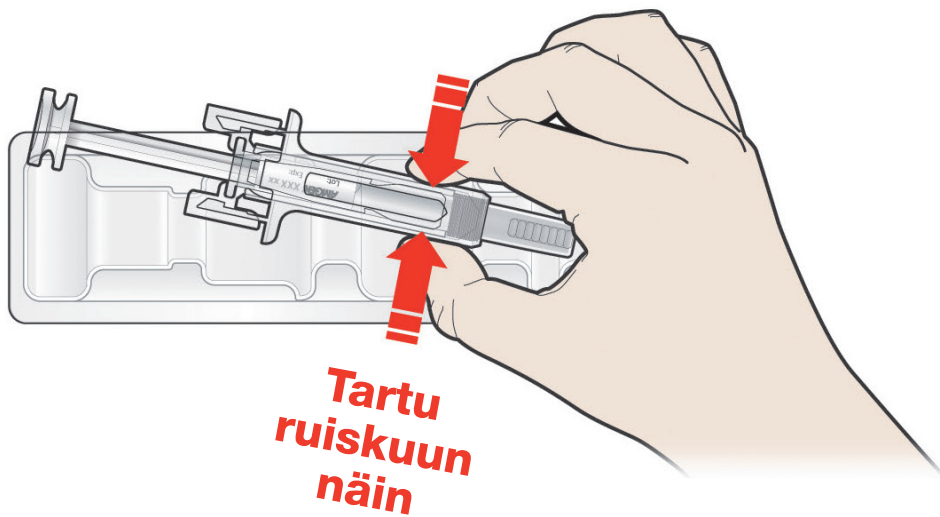

Vaihe 2: Pistoksen valmistelu


A

**Pese kädet huolellisesti.
Valitse pistoskohta ja puhdista se.**

Sopivat pistoskohdat:

- Reiden yläosa
- Vatsa, lukuun ottamatta 5 cm:n aluetta navan ympärillä
- Olkavarren ulkopinta (vain jos joku muu pistää annoksesi sinulle)

Puhdista pistoskohta desinfiointi-pyyhkeellä. Anna ihon kuivua.

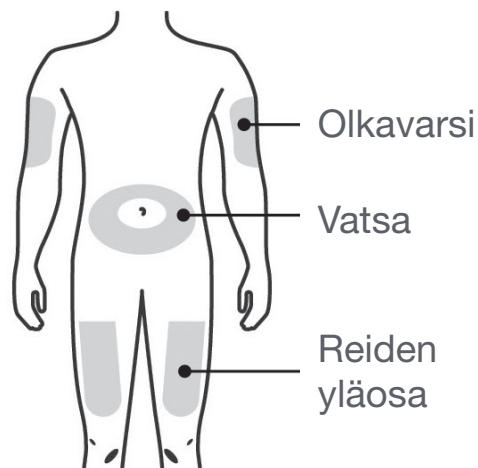


Älä koske pistoskohtaan ennen annoksen pistämistä



Älä pistä, jos ihoalue aristaa, punoittaa tai tuntuu kovalta tai jos siinä on mustelma. Vältä ihoalueita, joissa on arpia tai raskausarpia.

B

Vedä harmaa neulan-suojus varovasti pois suoraan ulospäin ja itsestäsi poispäin.

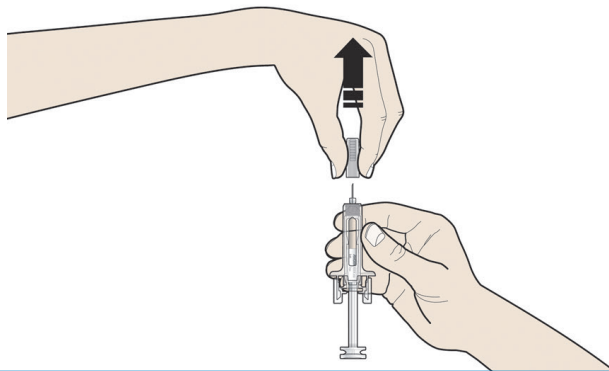


C

Purista pistoskohtaa niin, että siihen muodostuu kiinteä pinta.



On tärkeää, että ihopoimu on puristettuna sormien väliin, kun annos pistetään.

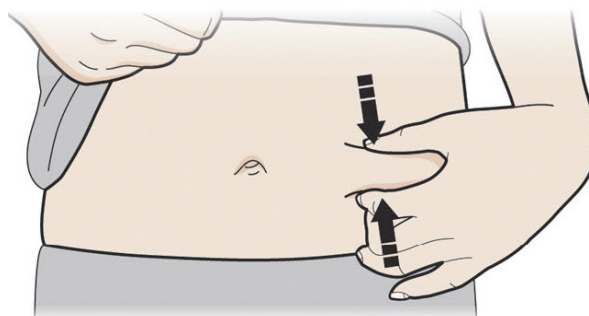


Vaihe 3: Annoksen pistäminen

A

Pidä pistoskohtaa sormien välissä. **TYÖNNÄ** neula ihon sisään.

× Älä koske puhdistettuun ihoalueeseen.

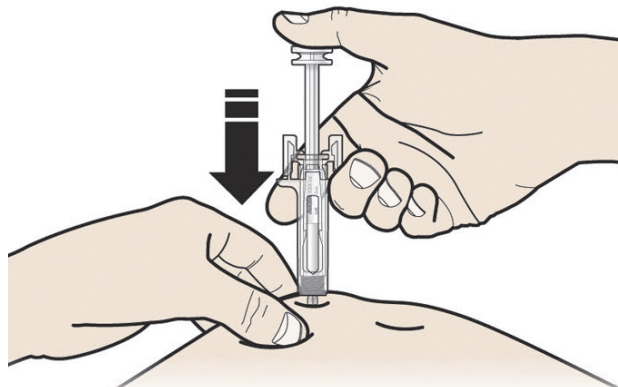


B

PAINA mäntää hitaasti ja tasaisesti, kunnes tunnet tai kuulet napsahduksen. Paina mäntä aivan pohjaan kunnes se napsahtaa.



On tärkeää, että mäntää painetaan, kunnes se napsahtaa, jotta saat varmasti koko annoksen.

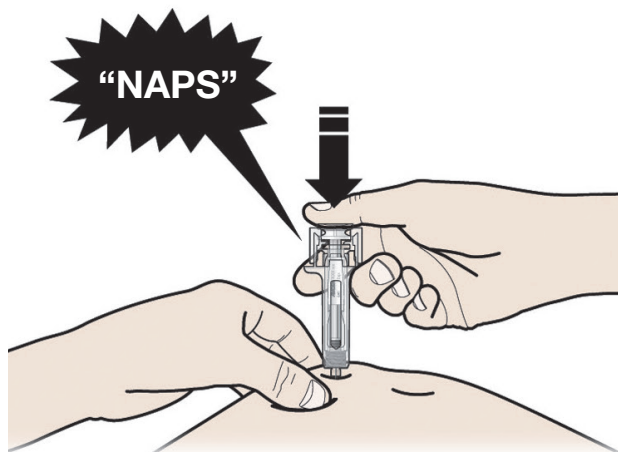

C

VAPAUTA mäntä. **NOSTA** sitten ruisku irti ihosta.

Kun mäntä on vapautettu, neula jää turvallisesti esitäytetyn ruiskun turvamekanismin sisään.

× Älä pane harmaata neulasuojusta takaisin käytettyyn esitäytettyyn ruiskuun.

